

A-Oss

BONE GRAFT MATERIAL

理想的な歯周組織再生形成ソリューション

注文コード

g \ Particle Size 0.25~1.0mm [S]

0.1(0.2cc)	BAS01
0.25(0.5cc)	BAS02
0.5(1.0cc)	BAS05
1.0(2.0cc)	BAS10
2.0(4.0cc)	BAS20

g \ Particle Size 1.0~2.0mm [L]

0.25(0.75cc)	BAL02
0.5(1.5cc)	BAL05
1.0(3.0cc)	BAL10
2.0(6.0cc)	BAL20



理想的な歯周組織再生ソリューション

Human bone

A-Oss

A-OSS


GTR Material Bovine bone

A-Oss 歯周組織再生の理想的な骨補填材(Bone Substitutes)


A-Oss は、ヒト海綿骨と同様に、大孔や微小孔を多数有した多孔質体であります。骨欠損部に**A-Oss**により骨補填を行う時、**A-Oss** 表面の微小構造が骨芽細胞付着のために適した環境を提供し、多孔性構造が末梢血管の成長や骨堆積のための十分なスペースとなることで、骨の再形成が促されます。

A-Oss Specification

- ・ DBB (Deproteinized Bovine Bone)
- ・ High Osteoconduction
- ・ Superior volume maintenance
- ・ Superior biocompatibility

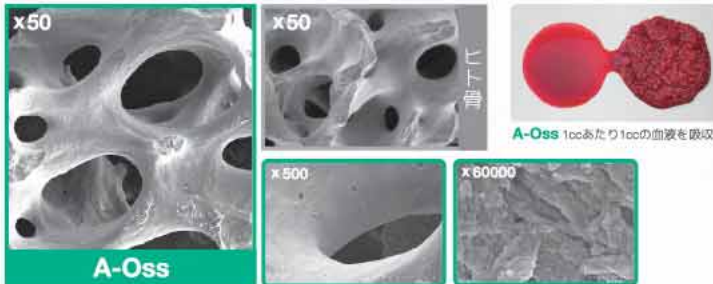

▲表面形態のSEM観察結果

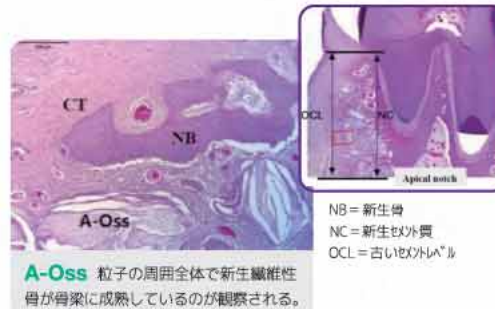

A-Oss 粒子の周囲全体で新生織維性骨が骨梁に成熟しているのが観察される。

・注文コード・

g	Particle Size 0.25-1.0mm (S)
0.1(0.2cc)	BAS01
0.25(0.5cc)	BAS02
0.5(1.0cc)	BAS05
1.0(2.0cc)	BAS10
2.0(4.0cc)	BAS20

g	Particle Size 1.0-2.0mm (L)
0.25(0.75cc)	BAL02
0.5(1.5cc)	BAL05
1.0(3.0cc)	BAL10
2.0(6.0cc)	BAL20

Oss-Siries

GBR Material

3D Titanium Membrane



1Wall augmentation	2Wall augmentation	3Wall augmentation
Buccal side bone defect	Buccal, Proximal (Mesial-Distal) side bone defect	Buccal, Proximal (Mesial-Distal) and Lingual side bone defect

OssBuilder

切ったり、曲げる必要のない3Dチタンメッシュ



データ提供: デンタルチームジャパン・金山健夫先生

販売先 73-3A-4-834 連絡先 22-40027-00006200 販売先 03-5747-1311 連絡先 22-40027-00025003 販売先 4254-056 連絡先 30206/00036003

株式会社 OSSTEM JAPAN 〒141-0021 東京都品川区上大崎4-5-37本多電機ビルB1F TEL.03-5747-9441 FAX.03-5747-9442



今だけお友達登録特典!
Vussen Double-Wide 歯ブラシ



3D Pre-formed Titanium Membrane


OSSTEM[®]
IMPLANT

OSSBUILDER KIT

TENTING SCREW DRILL, STOPPER, AUTOBONE COLLECTOR, HAND DRIVER, MACHINE SCREW DRIVER, BONE EJECTOR, DEFECT GAUGE

OSSBUILDER KIT

GBR施術に必要なツールを
一つのキットにまとめ構成しました。

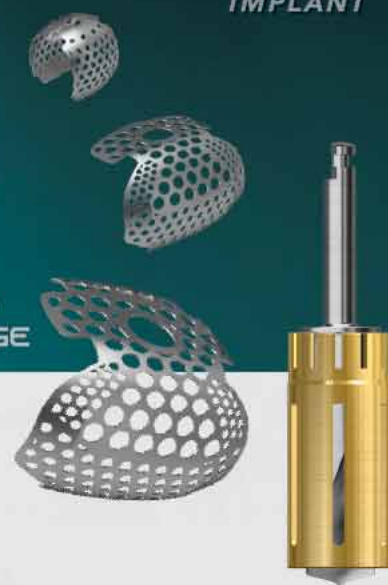

05-2020 / Ver.1




3D Pre-formed Titanium Membrane OssBuilder

OSSTEM[®]
IMPLANT

切ったり、曲げる必要のない3Dデザイン

Bone Healing時のExposure現象を解消

除去の時、軟組織切開の最小化

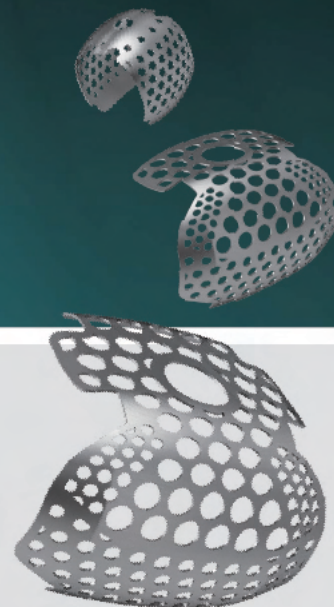

OssBuilder Selection

OB2 小さな水平及び縦骨の増大




OB3 広範囲な10mm以上の水平及び縦骨の増大




Check Point2

切ったり、曲げる必要のない3Dデザイン

- ・ 3D Pre-Formed Designで施術時の快適さを増大
- ・ 様々な臨床Case に適用可能なLine-Up

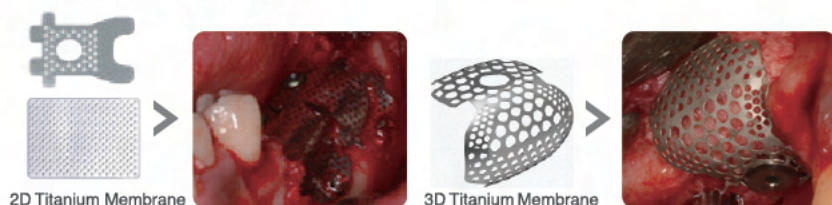


Features of OssBuilder

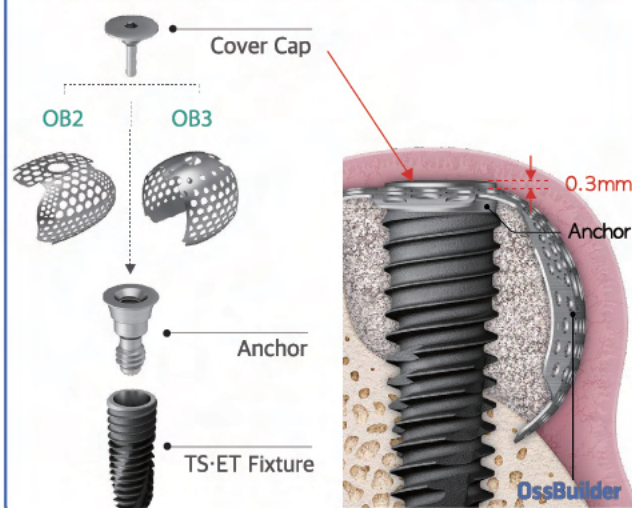

Check Point1

Bone Healing時のExposure現象を解消

- ・ Cover Cap H : 0.3mmで縫合後の露出の可能性を最小化

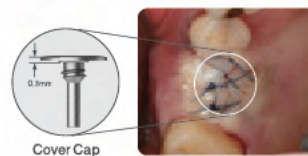

Check Point3

除去の時、軟組織切開の最小化

- ・ Round design及び優秀なRigidityにより下方固定用Screwなしでも形態維持が可能
- ・ 最小限のFlap openにより2次オペが可能



3D Pre-formed Titanium Membrane OssBuilder

株式会社 オステムジャパン

販売名: Oss Builder TSシステム, オステムHAフィクスチャーシステム
承認番号: 230008Z100023000, 224008Z100006000

Tokyo Head Office

〒141-0021 東京都品川区上大崎4-5-37本多電機ビルB1F

TEL 03(5747)9441

FAX 03(5747)9442